



mgcdiagnostics.com/products/fenom-flo-resources



SYSTEMINSTALLATION

- .NET Desktop Runtime 6.0.33

The .NET Desktop Runtime enables you to run existing Windows desktop applications. This release includes the .NET Runtime; you don't need to install it separately.

OS	Installers	Binaries
Windows	Arm64 x64 x86 winget instructions	



-

STROM UND ANSCHLUSS

-

III PATIENTENTESTS

1. Fassen Sie das Fenom Flo-Gerät.
Wichtig – Berühren Sie nicht die Atemwegsöffnung.
2. Installieren Sie ein Mundstück für den Einmalgebrauch. Drücken Sie fest, um sicherzustellen, dass das Mundstück sicher mit dem Gerät verbunden ist.
 - Gemäß dem technischen Standard 2022 ERS wird der 10-Sekunden-Modus für erwachsene Patienten empfohlen. Der 6-Sekunden-Modus wird für pädiatrische Patienten und Erwachsene empfohlen, die den 10-Sekunden-Modus nicht ausführen können.
3. Weisen Sie den Patienten an, Folgendes zu tun:
 - Halten Sie das Gerät fest mit einer oder beiden Händen.
 - Setzen Sie sich gerade hin und stellen Sie die Füße flach auf den Boden.
 - Atmen Sie natürlich durch den Mund ein und füllen Sie Ihre Lungen vollständig auf.
 - Legen Sie Ihren Mund auf das Mundstück und umschließen Sie das Mundstück mit den Lippen, bis es einen dichten Sitz hat.
 - Atmen Sie sanft aus und steigern Sie die Ausatmung allmählich, bis Sie den Zeiger im grünen Bereich halten können.
 - Beenden Sie das Ausatmen sofort, wenn die Zeit auf Null abläuft und das Stopp-Symbol auf dem Bildschirm erscheint. 
 - Wiederholen Sie den Versuch, wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, und achten Sie dabei auf die in der Fehlermeldung enthaltenen Informationen zum Coaching des Patienten.

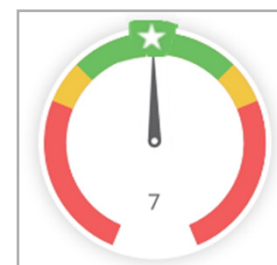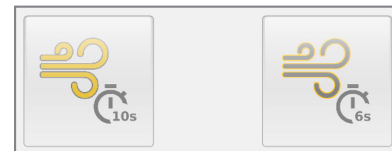

HINWEIS:



Das Tutorial kann mit einem neuen Patienten verwendet werden, um die Schritte zur Durchführung eines FeNO-Tests zu demonstrieren.



4. Drücken Sie die Exit-Taste und schalten Sie das Fenom Flo-Gerät aus, indem Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt halten und dann loslassen.
5. Entsorgen Sie das Mundstück für den einmaligen Gebrauch.

III REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die EXIT-Taste und schalten Sie das Gerät aus.
2. Vorsichtig mit 5 %igen Bleichtüchern reinigen und trocknen lassen.
3. Laden Sie das Gerät auf.

Detaillierte Anweisungen finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung von Fenom Flo: Teilnr. 142255-001.

INDICATEUR LED DE L'APPAREIL TOUCHE

	Deaktiviert		Lila (durchgehend): Hardware-Initialisierung
	Blau (blinkend): Suche nach einem Bluetooth-Host		Orange (durchgehend): Flash-Speicher wird initialisiert
	Blau (durchgehend): Mit Bluetooth-Host verbunden		Cyan (fest): Analyse der Umgebungsbedingungen
			
	Gelb (durchgehend): Batterie < 20 %		
	Rot (durchgehend): Batterie < 5 %		
	Rot (blinkend): Fehlerzustand		

MGC DIAGNOSTICS CORPORATION, through its subsidiary Medical Graphics Corporation

350 Oak Grove Parkway St. Paul, Minnesota USA 55127-8599

© 2026 MGC Diagnostics Corporation or one of its affiliates. All rights reserved.

All specifications subject to change without notice. Products may vary from those illustrated.

MGC Diagnostics and its affiliates are equal opportunity/affirmative action employers committed to cultural diversity in the workforce.

Part# 060179-005 RevD

