


# Réseau informatique

Solution fiable pour l'intégration du système Medisoft à l'infrastructure réseau de votre hôpital



medisoft®  
CARDIO-RESPIRATORY INSTRUMENTATION

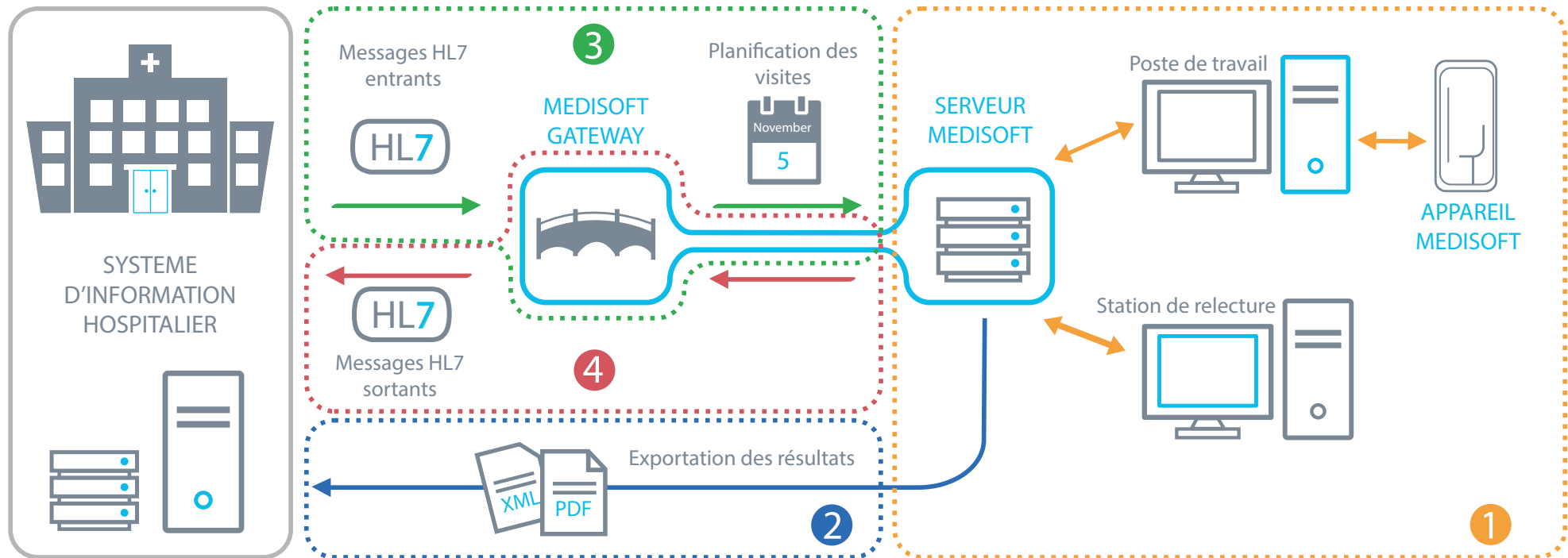

## 1 Base de données

Une base de données partagée est la solution pour simplifier les opérations et la gestion des données, centraliser les données patients et garantir l'intégrité des données de la solution Medisoft Expair.

Avec cette base de données partagée, les données sont disponibles sur les stations de lecture tout comme sur tout autre système Medisoft.

Le mode de réplication de données permet de garantir un flux de données ininterrompu malgré d'éventuelles perturbations sur le réseau.

## 2 Exportation des résultats

Expair fournit des solutions pour l'exportation des données dans de multiples formats, dont PDF, TXT, CSV, XMI et XLS.

## 3 Connexion depuis le SIH vers Expair

Grâce au module additionnel Gateway permettant l'interfaçage HL7, Expair devient compatible HL7 et peut recevoir toutes demandes de visites patients depuis le SIH et disposer celles-ci dans une liste de travail. De la sorte, chaque entrée de la liste de travail peut être utilisée pour effectuer un examen.

## 4 Connexion depuis Expair vers le SIH

Grâce au module additionnel Gateway permettant l'interfaçage HL7, Expair devient compatible HL7 et peut directement et automatiquement envoyer les résultats des examens vers le SIH.

www.medisoft.be  
t. +32 (0) 82 22 30 20  
info@medisoft.be

## Légende :

- Point vide :  
Choix cumulatif, peut être combiné avec d'autres options.
- Point rempli :  
Choix exclusif, ne peut pas être combiné avec d'autres options.

# Réseau informatique Configurateur

1118ITFRCO

- Logiciel Medisoft Expair
  - IT-00-08 • 1 licence
  - IT-00-09 • 2-5 licences (prix par station)
  - IT-00-10 • 6 licences ou plus (prix par station)
  - IT-00-15 • Mise à jour du logiciel

## 1 Base de données

- IT-00-11 • Installation de la base de données MySQL sur le serveur
- Configuration de la connexion à la base de données partagée
  - IT-00-40 • 1 station
  - IT-00-41 • 2 à 5 stations (prix par station)
  - IT-00-42 • 6 stations ou plus (prix par station)
- Transfert de la base de données locale vers le serveur
  - IT-00-49 • 1 Mb à 2 Gb
  - IT-00-50 • 2 Gb à 100 Gb
  - IT-00-51 • 100 Gb ou plus

## 2 Exportation des résultats

- Configuration de l'exportation des résultats
  - IT-00-43 • 1 station
  - IT-00-44 • 2 à 5 stations (prix par station)
  - IT-00-45 • 6 stations ou plus (prix par station)

## 3 Connexion depuis le SIH vers Expair

- Activation de la clé HL7
  - IT-00-46 • 1 station
  - IT-00-47 • 2 à 5 stations (prix par station)
  - IT-00-48 • 6 stations ou plus (prix par station)
- IT-00-17 • Configuration de la connexion depuis le SIH vers Expair (IN)

## 4 Connexion depuis Expair vers le SIH

- Activation de la clé HL7
  - IT-00-46 • 1 station
  - IT-00-47 • 2 à 5 stations (prix par station)
  - IT-00-48 • 6 stations ou plus (prix par station)
- IT-00-16 • Configuration de la connexion depuis Expair vers le SIH (OUT)